

**ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ИНФРАЧЕРВЕН
ТЕРМОМЕТЪР ЗА ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА No. 466066**

ЗА УРЕДА

Компактен, здрав и лесен за използване термометър за измерване на телесна температура. Измерва без контакт. Доближавате до челото, натискате бутона и отчитате температурата за по-малко от секунда. Запаметява до 32 последователни измервания.

КАК РАБОТИ


Термометърът приема отразена, излъчена или преминала от/през предмета/повърхността му енергия от инфрачервения спектър. Електрониката анализира сигнала и показва температурата на LCD дисплей с подсветка.

ВНИМАНИЕ

Пазете от електромагнитни излъчвания, резки температурни промени и не оставайте близо до обекти с висока температура.

БУТОНИ и ЕЛЕМЕНТИ на УРЕДА

1. Отвор за сензора
2. Дисплей
3. Бутон +
4. Бутон -
5. Бутон **MODE**
6. Бутон за вкл./изкл. на подсветката
7. Бутон-спусък за вкл. и измерване
8. Отделение за батериите

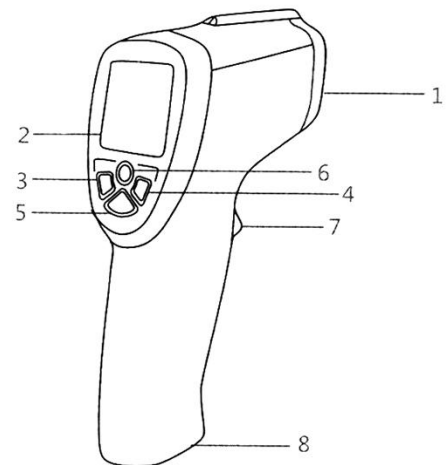

ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА

При първо ползване поставете 2 батерии размер AAA 1,5V (не са включени в комплекта) в отделението отдолу като спазвате указаната полярност.

Доближете на 3 ÷ 5 сантиметра от челото на човека и натиснете бутон 7. Изчакайте около секунда. Ще чуете звуков сигнал при установяване на телесната температура. Погледнете дисплея и отчетете измерената температура. При температура по-ниска от 32°C се чува 3-кратен звуков сигнал за ниска температура и дисплеят показва **Lo**. При температура по-висока от 38°C се чува продължителен звуков сигнал за висока температура и дисплеят показва **Hi**.

Запис от предишни измервания може да презгледате с натискане на бутони +3 и -4.

Внимание ! Измерването на телесна температура може да даде отклонение в случай на екстремно ниска или висока околна температура. Моля, спазвайте обявения температурен диапазон от 16 до 35 градуса.



НАСТРОЙКИ

Включете уреда с натискане на спусъка 7. За да влезете в режим настройки натиснете и задръжте бутон 5 за повече от 3 секунди. Имате достъп до 3 настройки:

F1 регулиране на отклонението (калибриране) със стъпка 0,1°C (по подразбиране е 0,0°C). Към тази настройка може да се пристъпи само след прецизно измерване с еталонен термометър при нормална стайна и телесна температури. Избира се стойност с натискане на бутони +3 и -4.

F2 настройване на висока аларма +/-3°C (по подразбиране е 38°C)

F3 смяна на °C и °F

СМЯНА на ОБЕКТА

При включен уред натиснете и задръжте бутон 6 за повече от 3 секунди за да смените типа на измерване от телесна температура на друг обект. На дисплея се изписва **Object temp**. В този режим може да измервате температурата в обхвата 0°C ÷ 100°C на повърхността на различни обекти. Да се има предвид че измерената температура е средно аритметична за измерваната площ т.е. измерване от по-голямо разстояние дава по неточни (усреднени) резултати.

Внимание ! При често превключване на начина на измерване винаги проверявайте дали е избран **Body temp** преди да измерите телесна температура.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Температурен обхват	-32°C ÷ 42,9°C телесна температура 0°C ÷ 100°C обекти
Точност	±0,2°C
Околна температура	16°C ÷ 35°C
Относителна влажност	RH<85%
Температура и влажност за съхранение	- 20°C ÷ 55°C RH<93%
Тегло и размер	82 g / 125x74x38 mm
Захранване	2 x AAA 1.5V (препоръчват се алкални)
Консумация	<30mW при измерване

ГРИЖИ

- Почиствайте тялото на термометъра с мека, навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни препарати или такива на спиртна или ацетонова основа.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Пазете от намокряне.
- Пазете от изтърване, вибрации и силни сътресения.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
 - A. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита (IP44, IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтване.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външен сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
 - B. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най-различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
 - C. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София,	ул. „Хан Аспарух“ 1	тел.: (02) 9525144
София,	бул. „Прага“ 22	тел.: (02) 8510505
София,	бул. „Пиротска“ 33	тел.: (02) 9801213
Варна,	ул. „Поп Харитон“ 10	тел.: (052) 600424

Русе,	бул. „Съединение“ 37	тел.: (082) 836075
Стара Загора,	ул. „Ген. Столетов“ 113	тел.: (042) 624552
Плевен,	ул. „Д. Константинов“ 23	тел.: (064) 822822
Бургас,	ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: (056) 842200

Пловдив, ул. „Самара“ 20

тел.: (032) 962316

Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ 35

тел.: (062) 670362